



O-Bite

Твердость для
оптимальной окклюзии.



Твердость для
оптимальной
окклюзии. **O-Bite.**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Один из самых твердых материалов для регистрации прикуса среди А-силиконов	> Отсутствие усадки и деформации после установки.
Высокая прочность	> Легкость обрезки и финишной обработки > Снижение риска поломки
Длительное рабочее время	> Безопасное нанесение на всю дугу нижней челюсти
Короткое время отверждения в полости рта	> Быстрая фиксация прикуса
Свежий фруктовый аромат апельсина	> Высокий уровень комфорта для пациента



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

O-Bite

Упаковка: 2 картриджа Кому 50 мл, 12 Automix-Tips REF 909765

Экономичный набор: 8 картриджа Кому 50 мл, 50 Automix-Tips REF 909767

Аксессуары: 1 Automix-Dispenser Type 50 10:1 REF 909507
50 Automix-Tips Pink 1:1 REF 909202
50 Conturation-Tips REF 909203

Идеальная посадка реставраций без утомительной шлифовки.

O-Bite, самостоятельного смешивания А-силиконовый материал от компании DMG для регистрации прикуса с твердостью по шкале Шора-А 95, обеспечивает идеальную посадку реставраций без утомительной шлифовки окклюзионной высоты.

Еще одним преимуществом является разработанная компанией DMG винилсиликоновая матрица, которая, благодаря однородной структуре, придает материалу высокую прочность и максимальную твердость. O-Bite обрабатывается скальпелем или бором для силикона.

Материал обладает фруктовым ароматом апельсина. Многочисленные выдающиеся свойства материала впечатляют даже экспертов. O-Bite получил 4 звезды от независимого испытательного института «Reality» и первое место по оценкам пользователей среди всех протестированных материалов для регистрации прикуса.

ВЫСОЧАЙШАЯ КОНЕЧНАЯ ТВЕРДОСТЬ


O-Bite с твердостью по шкале Шора-А 94 является самым твердым материалом для регистрации прикуса на основе А-силикона. Высокая окончательная твердость материала особенно важна при переносе зарегистрированного прикуса на модели в артикуляторе с целью гарантированного обеспечения идеальной посадки реставраций.

Более мягкие силиконы изгибаются или сжимаются, препятствуя точной артикуляции. Это может привести к нежелательному завышению прикуса, что требует затратного по времени пришлифовывания. Установка завышенной реставрации может привести к существенному дискомфорту в нижнечелюстном суставе.

Благодаря своей высочайшей твердости O-Bite обеспечивает идеальное гнатологическое соотношение зубов.



ТВЕРДОСТЬ ПО ШКАЛЕ ШОРА-А ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА

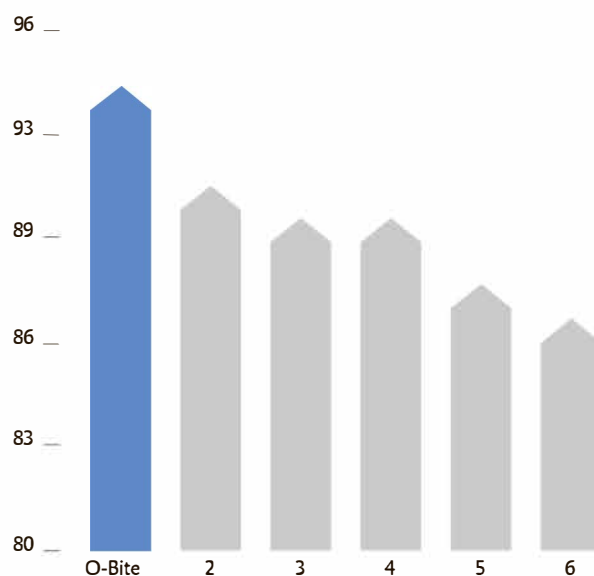

- 2 Colorbite, Zhermack
- 3 Imprint Bite, 3M Espe
- 4 Futar Occlusion, Kettenbach
- 5 Blu-Mousse Super Fast, Parkell
- 6 Futar D Fast, Kettenbach

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Благодаря разработанной DMC винилсиликоновой матрице, O-Bite обладает высокой прочностью.

Структура материала на основе А-силикона достигается за счет силиконовых цепочек равной длины, которые формируют особо стабильные связи при отверждении.

На практике эта характеристика гарантирует высокое сопротивление излому при извлечении, обработке и репозиции на модели.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	O-Bite
Рабочее время [мин]	0:30
Извлечение из полости рта после начала смешивания [мин]	1:30
Твёрдость по шкале Шора-A (1 час)	> 93
Размерная стабильность [%]	< 0,3



Прямое нанесение O-Bite.



Пациент с желаемой окклюзией.



Регистраторы прикуса перед снятием.



Простая обработка скальпелем или фрезой для силикона.




Нанесение O-Bite на прикусную вилку.



Регистрация с помощью прикусной вилки для лицевой дуги.



Лицевая дуга после регистрации прикуса.

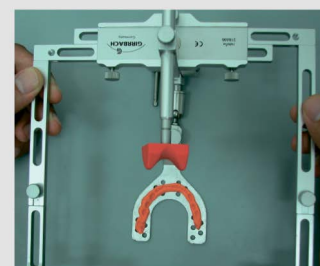

Лицевая дуга с материалом O-bite для переноса в артикулятор.

Валлекс М

Официальный дистрибьютор в России – ООО «ВАЛЛЕКС М»

Юр. адрес: 117630, Москва, Старокалужское ш., д. 62, эт. 3, пом. I, ком 60

Факт. адрес: 117133, Москва, ул. Академика Варги, д. 8, корп. 1

тел.: + 7 (495) 784-71-24; e-mail: stom@vallexm.ru

www.vallexm.ru, www.vallexm-stom.ru

DMG

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany

Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222

info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com

